

TÉCAR THÉRAPY

THE HEALING ENERGY



WE TAKE **CARE** OF YOU


GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LA CHALEUR QUI RÉGÉNÈRE


La **TÉCAR** est une thérapie innovatrice qui utilise la production de chaleur endogène pour traiter des traumatismes et des pathologies musculo squelettiques. La chaleur générée par le mouvement des charges électriques stimule les procès réparateurs et induit une action anti-inflammatoire et antalgique.

EFFETS BIOLOGIQUES


BIO-STIMULANT | ANTALGIQUE | ANTI-INFLAMMATOIRE
DÉCONTRACTURANT | VASODILATATEUR

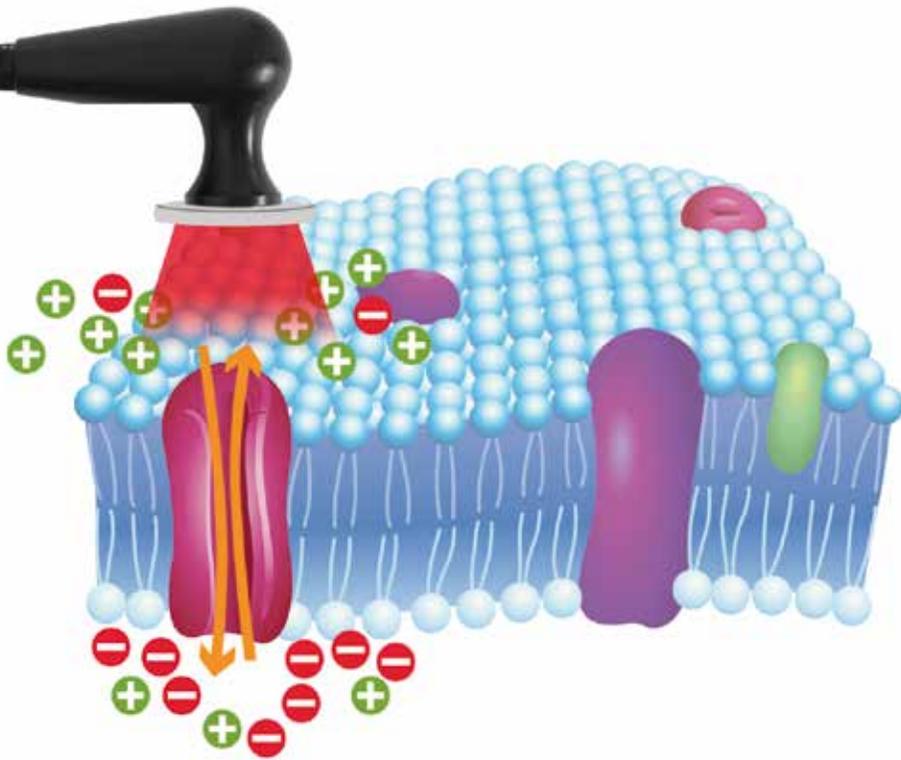

La **TÉCAR** thérapie peut être utilisée différemment sur la zone à traiter grâce à deux différentes modalités de transfert: capacitif et résistif.

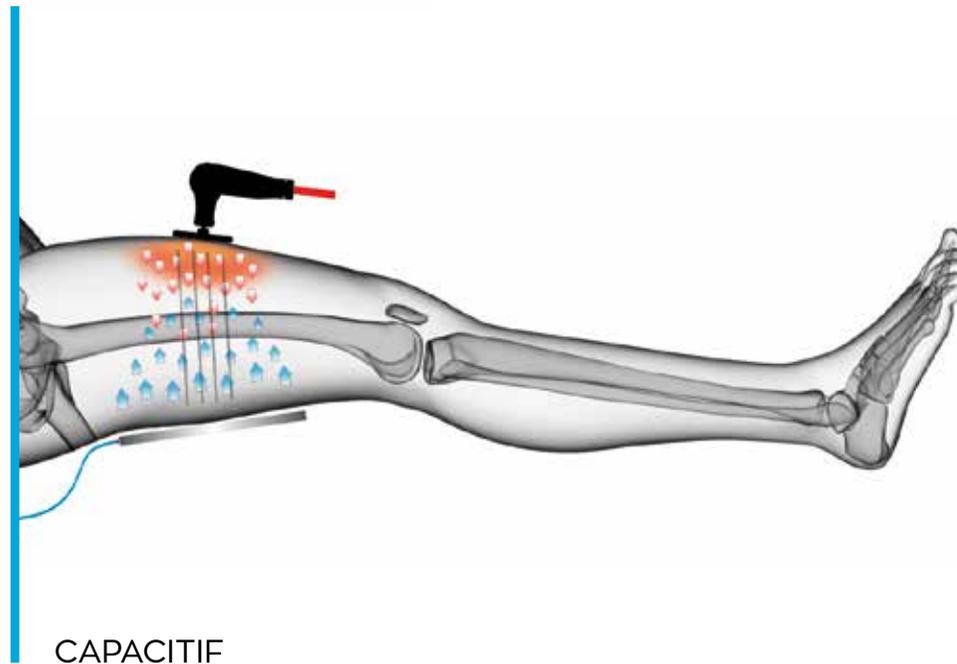

CAPACITIF

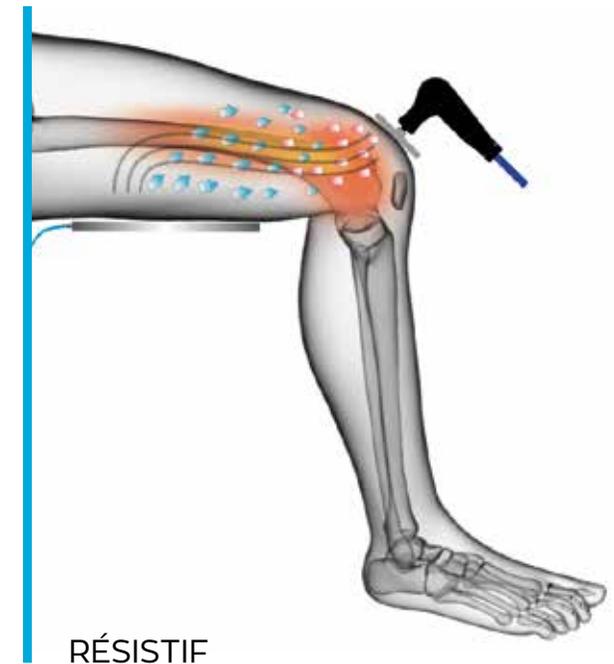

RÉSISTIF



• ATLAS DE TRAITEMENTS

Vaste bibliothèque de programmes prédéfinis divisés en secteurs anatomiques et complets d'images illustratives.



• MODALITÉ MAINS LIBRES

Grâce aux électrodes fixes, l'opérateur a la possibilité d'intervenir sur le patient en intégrant la thérapie avec des techniques manuelles.



• MULTIFRÉQUENCE

Vous pouvez choisir parmi différentes fréquences de travail pour traiter le patient de manière précise à des profondeurs différentes.



• VÉHICULATION TRANSDERMIQUE

Le programme permet de faciliter l'absorption du principe actif d'un médicament ou d'une crème.



• SCANNAGE AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES

Le programme permet, dans le même traitement, de transférer l'énergie uniformément à des profondeurs différentes.



• TRAITEMENTS EN ATHERMIE

Bio-stimulation des tissus sans production de chaleur pour traiter des pathologies qui ne peuvent pas être traitées avec des hautes températures.



• TRAITEMENTS PULSÉS

Programmes avec une émission pulsée avec duty cycle différent pour maintenir haute l'énergie transférée dans les tissus en conservant, en même temps, un bon contrôle sur la température.

PLUS **PROFESSIONNELS**, PLUS **COMPLETS**





DIACARE POUR LA **RÉÉDUCATION**

DIACARE s'affirme comme la méthode de traitement de plus en plus utilisée par les physiothérapeutes et les rééducateurs.

IDÉALE POUR TRAITEMENTS

- **OSTÉO-ARTICULAIRES**
- **TENDINEUX-LIGAMENTEUX**
- **MUSCULAIRES ET MYOFASCIALES**
- **DRAINAGE LYMPHATIQUE**
- **VASCULAIRES**
- **NEUROMUSCULAIRES**



DIACARE POUR LE **SPORT**

DIACARE entre comme protagoniste dans le monde du sport avec des nouvelles et extraordinaires applications.

IDÉAL POUR

- **ÉCHAUFFEMENT PROFOND**
- **RÉCUPÉRATION POST-COMPÉTITION**
- **AMÉLIORATION MOBILITÉ ARTICULAIRE**
- **PRÉVENCION ACCIDENTS**
- **RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÉS TRAUMATISMES**
- **DÉCONTRACTURER**

GLOBUS

GLOBUS CHRONIC LUMBAGO User: DU

Time 20' Mode RES F. mHz 470 Electrode MONO Size UNIVERSAL

650mA

REMAINING TIME 5'

44 %

55 w 49,5 KJ

130 Ω

Phases Ph 1 Ph 2

DiaCaRe 7000
TecaTherapy

PAUSE


POWER

SKIP

ATLAS DES TRAITEMENTS

DIACARE 7000 VOUS GUIDE DANS THÉRAPIE

Naviguez dans l'**ATLAS** et choisissez la pathologie à traiter. Vous allez trouver les paramètres de travail, une brève description et des images illustratives sur l'emplacement des électrodes.

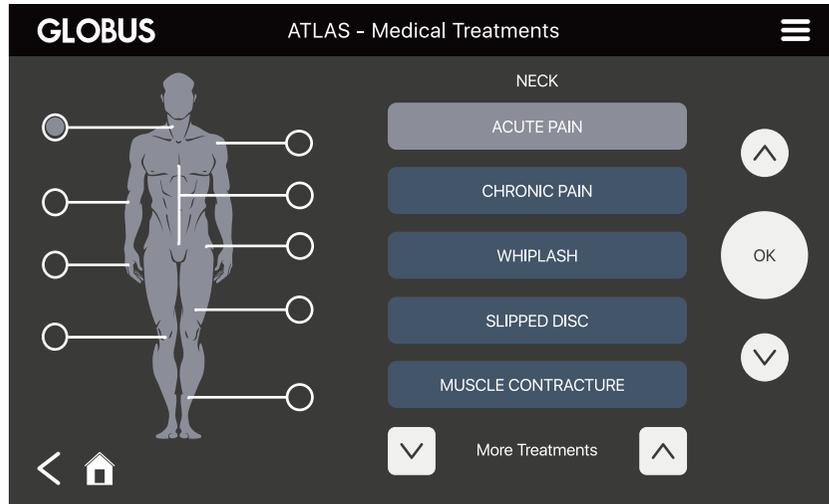



TRAITEMENT **MAINS LIBRES**

REDOUBLEZ LES POSSIBILITÉS **THÉRAPEUTIQUES**


UTILISEZ VOS MAINS

POUR TRAITER LE PATIENT.

DIACARE VA FAIRE LE RESTE



La modalité **MAINS LIBRES** prévoit l'utilisation de deux ou plus électrodes fixes qui sont placées sur la zone à traiter. De cette façon, le thérapeute peut effectuer en même temps des manœuvres sur le patient pour augmenter l'efficacité du traitement

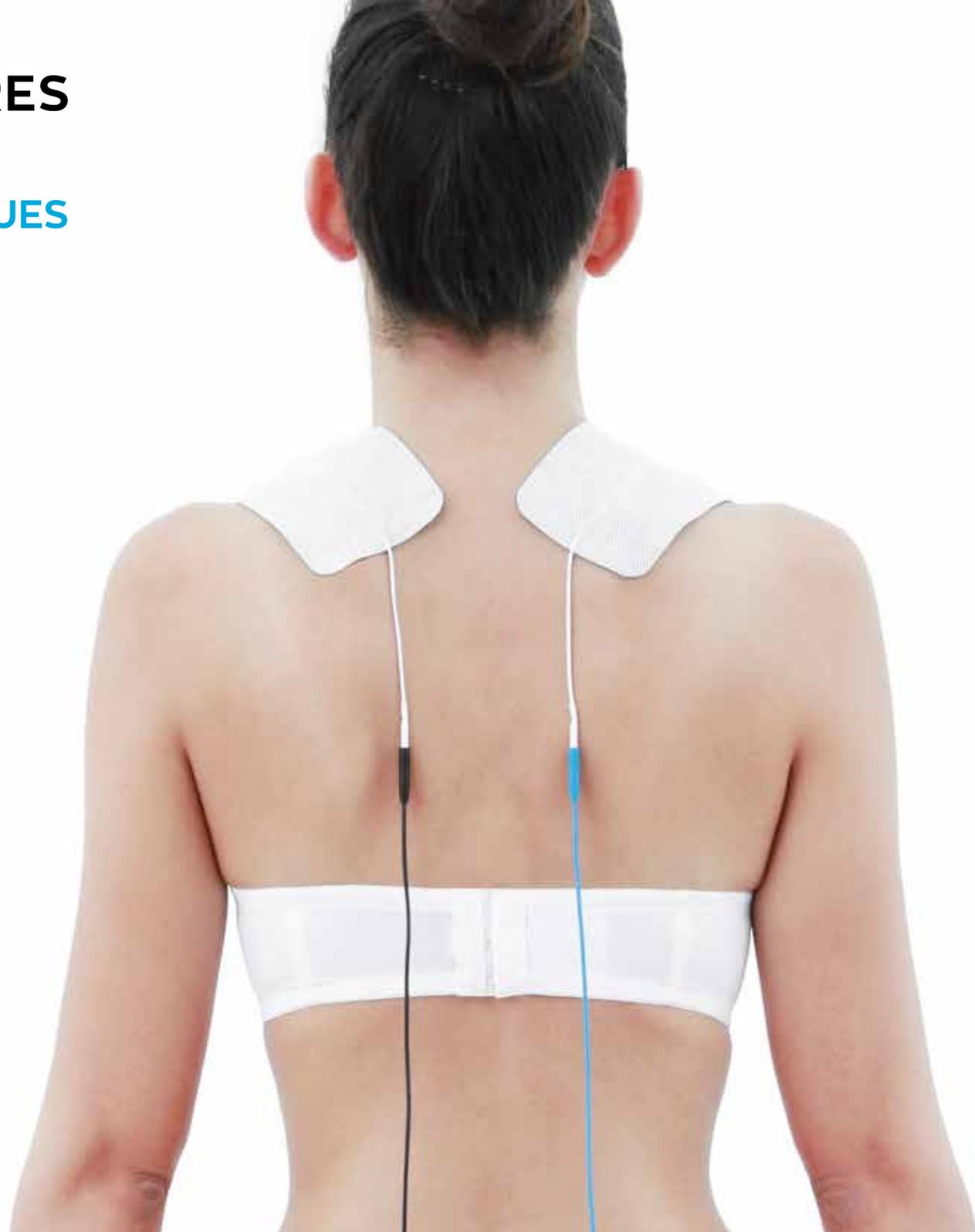

MULTIFRÉQUENCE

PORTEZ L'ÉNERGIE À LA PROFONDEUR DÉSIRÉE



DIACARE peut travailler à des profondeurs différentes pour toucher la cible thérapeutique.

OS ET ARTICULATIONS



ÉPIDERME, DERME, HIPODERME



MUSCLES ET TISSUS MOUS







PULSÉ

UTILISE LES TRAITEMENTS DIACARE
MÊME SUR DES PATHOLOGIES EN PHASE AIGÜE

TOUTE L'ÉNERGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN
SANS SURCHAUFFER LES TISSUS



DIACARE dispose de deux modalités d'émission de l'énergie, continue et pulsée. Avec les programmes à émission pulsée, avec un duty cycle différent, on peut maintenir haute l'énergie transférée dans les tissus, sans augmenter la température. Cette modalité est très utile pour traiter les traumatismes précocement et/ou en phase aiguë.

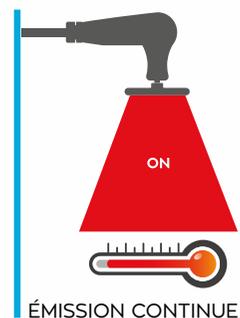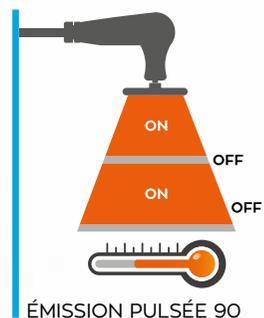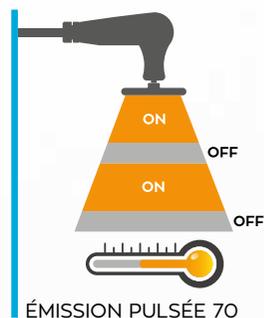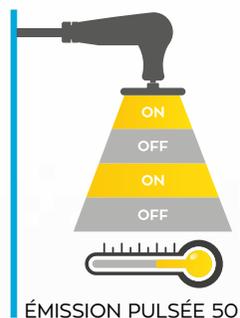



NOTRE GAMME **PROFESSIONNELLE**

MODÈLE **DIACARE 7000**

DIACARE 7000 est le modèle de pointe dans la gamme TÉCAR GLOBUS. **Extraordinairement puissante et complète**, elle offre un large éventail de possibilités aux professionnels les plus exigeants, qui aiment associer les traitements traditionnels avec l'innovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 350 W $\pm 10\%$

Fréquence d'émission: 400 kHz - 448 kHz - 470 kHz
700 kHz - 1000 kHz - 1200 kHz, $\pm 10\%$

Modalité de traitement: capacitif et résistif

Têtes: 2 monopolaires (capacitive et résistive)

Dimensions: 515x170x340 mm

PROGRAMMES PRÉDÉFINIS | VASTE ATLAS DES TRAITEMENTS

POINTS FORTS



MODÈLE **DIACARE 5000**

Le modèle **DIACARE 5000** résume toute la qualité de la TÉCAR GLOBUS dans un appareil de taille et poids réduits, pour garantir une **portabilité maximale**, sans en changer l'efficacité et le professionnalisme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 180 W $\pm 10\%$

Fréquence d'émission: 400 kHz - 448 kHz - 470 kHz
700 kHz - 1000 kHz, $\pm 10\%$

Modalité de traitement: capacitif et résistif

Têtes: 2 monopolaires (capacitive et résistive)

Dimensions: 170x220x60 mm

PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

POINTS FORTS



LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

AVEC LES ACCESSOIRES GLOBUS VOUS ALLEZ OBTENIR LE MIEUX

GLOBUS offre une gamme d'accessoires spécifiques et innovateurs pour adapter DIACARE aux exigences de votre activité professionnelle. Qualité et confort pour optimiser votre travail, en maintenant intacte l'efficacité.





LE MONDE GLOBUS

UN MONDE DE SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

GLOBUS est une entreprise leader mondial dans la production d'équipements électromédicaux portables depuis plus de 30 ans.

Notre large gamme inclut des lignes complètes de produits pour électrothérapie, diathermie, ultrasonothérapie, magnétothérapie, laserthérapie et plate-formes vibrantes.

NOTRE HISTOIRE

GLOBUS a été fondée en 1984 à Codognè, dans la province de Treviso (Italie), par son Président et Administrateur Délégué actuel, Pierpaolo Lucchetta, bronze de volley-ball aux jeux olympiques de Los Angeles et professionnel qui a gagné de nombreux prix jusqu'à 1994.

L'expérience d'athlète de haut niveau de son président a été fondamentale pour **GLOBUS** dans la conception et le développement de plusieurs lignes de produits visant le traitement d'un grand nombre de problèmes physiques, le renforcement musculaire et l'amélioration générale des prestations sportives. Afin de développer des produits sûrs, efficaces et hautement technologiques, **GLOBUS** se sert de nombreuses collaborations avec universités et instituts de recherche du monde entier et elle respecte scrupuleusement les lignes directrices les plus rigoureuses dans le domaine scientifique.

Aujourd'hui **GLOBUS** est une entreprise leader dans le secteur de la rééducation et de la physiothérapie et elle exporte dans plus de 70 pays

du monde.

Les produits **GLOBUS** sont certifiés UNI CEI EN ISO 13485:2012 et CE par le Système de Garantie de la Qualité en Europe, FDA aux États-Unis et IEx au Brésil.

NOTRE MISSION

La mission de **GLOBUS** est de contribuer à la promotion de la santé et du bien-être dans le monde en fournissant des produits de haute qualité aux professionnels de la rééducation et de la physiothérapie, mais aussi aux utilisateurs particuliers, qui veulent améliorer leur qualité de vie en totale sécurité, en bénéficiant des technologies les plus modernes disponibles aujourd'hui dans le marché.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

 Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIE

 (+39) 0438 7933

 tecarglobus.com | globuscorporation.com



Matériel informatif réservé aux opérateurs du domaine médical.
Les images et les caractéristiques techniques qui se trouvent dans ce dépliant ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées à tout moment par le producteur, sans obligation de préavis.
Pour plus d'informations sur nos produits et traitements, pour regarder les vidéos de nos produits et pour connaître nos revendeurs, visitez notre site.

Rev. Fr_10_2022